

  
CARITA  
PARIS



My C.L.E.

CINETIC

LIFT

EXPERT

**DÉCOUVREZ LA PUISSANCE ANTI-ÂGE  
DES ÉNERGIES AVANCÉES  
LA 1<sup>RE</sup> COSMÉTIQUE INSTRUMENTALE À DOMICILE\***

TECHNOLOGIE LEDs ET MICRO-COURANTS  
POUR FAÇONNER LA FERMETÉ, LA PURETÉ,  
L'HOMOGENÉITÉ ET LA VITALITÉ DE LA PEAU.




AMPLIFIEZ VOTRE ROUTINE DE SOIN :

# My C.L.E.

**Avec My C.L.E., inspiré de la machine professionnelle Carita, le Cinetic Lift™ Expert, transformez votre routine beauté à la maison.**

- 2 énergies pour stimuler votre peau jour après jour –  
Micro-courants\* et LEDs\*\* pour dynamiser la peau en profondeur et agir sur sa texture, sa densité et sa vitalité.
- 1 utilisation modulable pour une routine sur mesure –  
Chaque paramètre de My C.L.E. peut être sélectionné individuellement afin de répondre parfaitement aux besoins de la peau à tout instant.

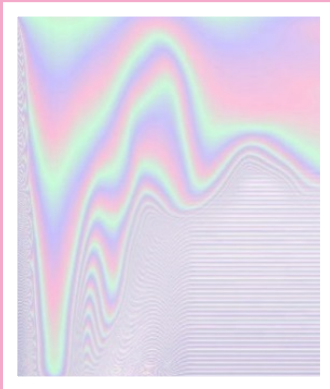

### MICRO-COURANTS:

« ÉNERGIE À ACTION IMMÉDIATE »  
5 NIVEAUX D'INTENSITÉ DISPONIBLES  
POUR TONIFIER LA PEAU.



### LEDs\*\*:

« ÉNERGIE À ACTION PROGRESSIVE »  
4 COULEURS DISPONIBLES POUR  
AMÉLIORER LA FERMETÉ, LA PURETÉ,  
L'HOMOGÉNÉITÉ ET LA VITALITÉ  
DE LA PEAU.



FERMETÉ



PURETÉ



HOMOGÉNÉITÉ



VITALITÉ

# RÉSULTATS VISIBLES DÈS 4 SEMAINES

Testé et approuvé par les femmes.

## PROGRAMME DE BEAUTÉ VISAGE\*

PLUS DE **80%**

Ressentent leur peau, après 28 jours,  
**TRANSFORMÉE, REDENSIFIÉE,  
COMME LIFTÉE**

**79%**

Ressentent leur peau, après 28 jours,  
**PLUS RÉSISTANTE, PLUS JEUNE**

**83%**

Sont convaincues par l'**EFFICACITÉ** de la routine  
et aimeraient utiliser My C.L.E. quotidiennement

## PROGRAMME DE BEAUTÉ CORPS\*\*

**96%**

Ressentent leur peau, après 28 jours,  
**PLUS CONFORTABLE**

**71%**

Ressentent leur peau, après 28 jours,  
**PLUS LISSE**

**71%**

Ressentent leur peau, après 28 jours,  
**PLUS HOMOGENÈ**

\*PROTOCOLE : LED ROUGE ET MICRO-COURANTS INTENSIFIÉ 5 AVEC LE SÉRUM NÉOMORPHOSE 7MIN/JOUR PENDANT 28 JOURS.

\*\*AUTO-ÉVALUATIONS SUR 49 FEMMES QUI ONT APPLIQUÉ LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMÉTÉ CARITA EN ASSOCIATION AVEC My C.L.E. 1/JOUR : SUR LES CUISSÉS, L'ABDOMEN ET LES BRAS (LED ROUGE ET MICRO-COURANTS INTENSIFIÉ 5); RÉSULTATS APRÈS 4 SEMAINES.

# PROGRAMME DE BEAUTÉ VISAGE À DOMICILE

## ANTI-ÂGE : 1, 2, 3, LIFT !



**LED ROUGE & MICRO COURANTS INTENSITÉ 4-5**

**3 OPTIONS DE SÉRUM :**

**POUR UNE ACTION ANTI-RIDES  
ET UN EFFET TENSEUR**

LE SÉRUM NÉOMORPHOSE  
(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)

**POUR UNE ACTION RAFFERMISANTE  
ET UN EFFET TENSEUR**

LE SÉRUM STIMULIFT  
(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)


**POUR UNE ACTION ANTI-ÂGE GLOBAL**

LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS  
(4-6 pressions sur l'ensemble du visage)



EFFECTUER DES MOUVEMENTS DE LISSAGE ASCENDANTS POUR RAFFERMIR ET REPULPER VOTRE PEAU. RÉPÉTER 3 FOIS CHAQUE MOUVEMENT. RÉALISER LE PROGRAMME DE BAS EN HAUT EN DÉMARRANT PAR LE DÉCOLLETÉ.

## ANTI-IMPERFECTIONS : PEAU SOUS CONTRÔLE

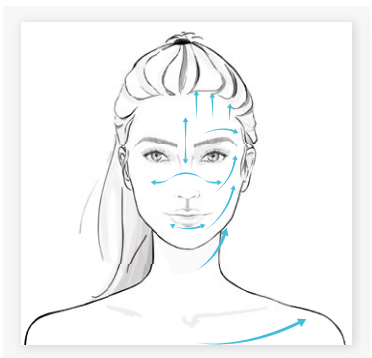

**LED BLEUE & MICRO COURANTS INTENSITÉ 1-3**

**1 OPTION DE SÉRUM :**


**POUR UNE ACTION PURIFIANTE ET  
RÉÉQUILIBRANTE**

LE SÉRUM CONTRÔLE  
(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)



EFFECTUER DE LÉGERS MOUVEMENTS EN ALLER-RETOUR LOCALISÉS SUR LA ZONE-T (MENTON, NEZ, FRONT) POUR PURIFIER LA PEAU. RÉPÉTER 3 FOIS CHAQUE MOUVEMENT. RÉALISER LE PROGRAMME DE BAS EN HAUT EN DÉMARRANT PAR LE DÉCOLLETÉ.

## ANTI-TÂCHES/ROUGEURS : MISSION TEINT PARFAIT !

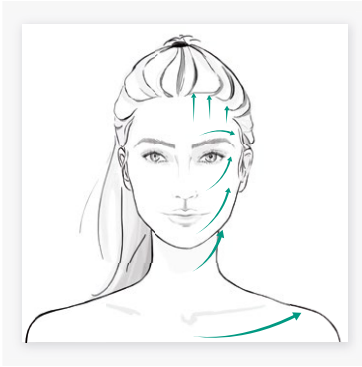

### LED VERTE & MICRO-COURANTS INTENSITÉ 1-3

#### 3 OPTIONS DE SÉRUM :

##### POUR UNE ACTION ANTI-TÂCHES

LE SÉRUM CLARTÉ

(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)

##### POUR UNE ACTION APAISANTE ET RÉCONFORTANTE

LE SÉRUM SENSIDOTE

(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)

##### POUR UNE ACTION ANTI-ÂGE GLOBAL

LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS

(4-6 pressions sur l'ensemble du visage)



EFFECTUER DES MOUVEMENTS CIRCULAIRES SUR LES ZONES CIBLÉES POUR UNIFIER LE TEINT. RÉPÉTER 3 FOIS CHAQUE MOUVEMENT. RÉALISER LE PROGRAMME DE BAS EN HAUT EN DÉMARRANT PAR LE DÉCOLLETÉ.

## ANTI-TEINT TERNE : COUP D'ÉCLAT IMMÉDIAT



### LED BLANCHE & MICRO-COURANTS INTENSITÉ 1-3

#### 2 OPTIONS DE SÉRUM :

##### POUR UNE ACTION ANTI-TEINT TERNE ET HYDRATANTE

LE SÉRUM LAGON

(6-8 pressions sur l'ensemble du visage)

##### POUR UNE ACTION ANTI-ÂGE GLOBAL

LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS

(4-6 pressions sur l'ensemble du visage)



EFFECTUER DES MOUVEMENTS EN « 3 » SUR L'ENSEMBLE DU VISAGE POUR REVITALISER VOTRE PEAU ET RÉVÉLER UN TEINT ÉCLATANT. RÉPÉTER 3 FOIS CHAQUE MOUVEMENT. RÉALISER LE PROGRAMME DE BAS EN HAUT EN DÉMARRANT PAR LE DÉCOLLETÉ.

# NOS 5 ENGAGEMENTS

## 1 - DES RÉSULTATS SUR-MESURE

My C.L.E. A ÉTÉ TESTÉ SUR TOUS LES TYPES DE PEAUX ET OFFRE UN RÉSULTAT PERSONNALISÉ.

TROUVEZ LE PROGRAMME ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE PEAU (FERMETÉ, PURETÉ, HOMOGENÉITÉ ET VITALITÉ).

## 2 - DES PROGRAMMES TESTÉS ET APPROUVÉS

My C.L.E. EST RECOMMANDÉ PAR NOS EXPERTS BEAUTÉ.

## 3 - UN APPAREIL FACILE À UTILISER

TROUVEZ DES CONSEILS D'UTILISATION ET DES VIDÉOS EXPLICATIVES SUR NOTRE SITE INTERNET ([WWW.CARITA.FR](http://WWW.CARITA.FR)) DANS LA SECTION My C.L.E.


## 4 - UN APPAREIL FACILE À NETTOYER

UTILISEZ UN COTON HUMIDIFIÉ À L'EAU OU LÉGÈREMENT IMBIBÉ DE SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR ENTREtenir VOTRE APPAREIL. NE PAS RINCER DIRECTEMENT SOUS L'EAU.

## 5 - GARANTIE 2 ANS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET ([WWW.CARITA.FR](http://WWW.CARITA.FR)).

POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'APPAREIL, CONSULTEZ LE SERVICE CONSOMMATEUR CARITA : 30 RUE D'ALSACE - 92300 LEVALLOIS-PERRET, TÉL : 09 69 39 55 61

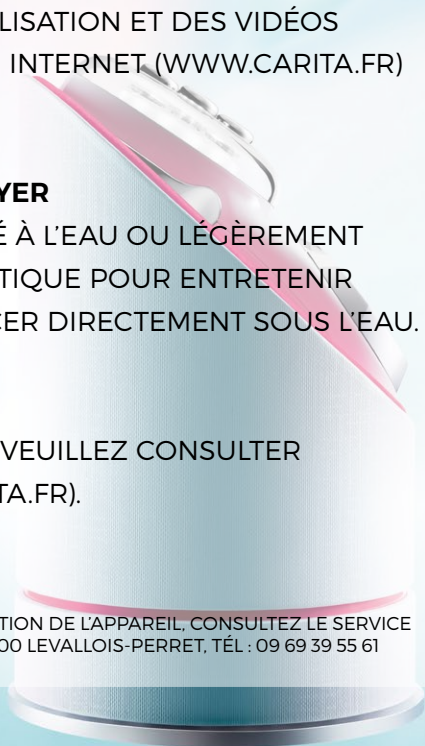



  
**CARITA**  
PARIS




# PROGRAMME DE BEAUTÉ CORPS À DOMICILE

## CHALLENGE BRAS FUSELÉS


7 MN

APRÈS AVOIR RÉALISÉ UNE APPLICATION MANUELLE DE LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMETÉ SUR LES BRAS ; EFFECTUER AVEC VOTRE APPAREIL DE BEAUTÉ, DES LISSAGES PROFONDS ASCENDANTS SUIVI D'UN MAINTIEN STATIQUE DE 3 SECONDES POUR FIXER L'EFFET. LES MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS QUI SUIVENT PERMETTRONT DE STIMULER LA PEAU DE FAÇON PLUS CIBLÉE. LA PEAU EST LISSE ET TONIFIÉE.


### 1. APPLIQUER LA CRÈME

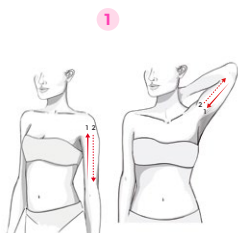

X3

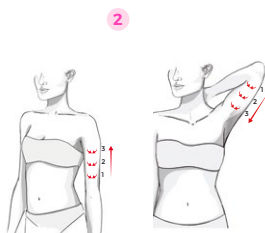


X3

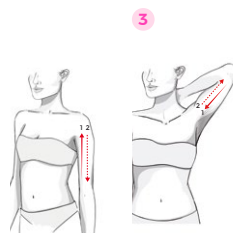


X3


### 2. ACTIVER

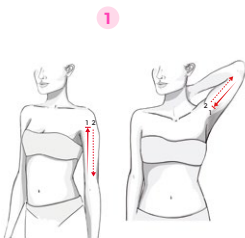

X3

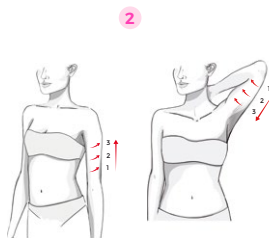

X3

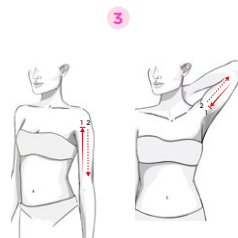

X3

MOUVEMENTS DE LISSAGE  
MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS

**LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMETÉ**  
(1 À 2 NOISSETES)

**LED ROUGE & MICRO-COURANTS INTENSITÉ 5**

**VENTRE :**  
MOUVEMENTS CIRCULAIRES LENTS  
MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS

**BRAS ET CUISSES :**  
MOUVEMENTS LIFT STATIQUES  
MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS



## OBJECTIF TAILLE SUBLIME


5  
MIN

APRÈS AVOIR RÉALISÉ UNE APPLICATION MANUELLE DE LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMETÉ SUR LE VENTRE ET LES HANCHES ; EFFECTUER AVEC VOTRE APPAREIL DE BEAUTÉ DES MOUVEMENTS CIRCULAIRES LENTS SUIVIS DE MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS. LA PEAU EST LISSE ET PROGRESSIVEMENT RETENDUE.

### 1. APPLIQUER LA CRÈME



X3

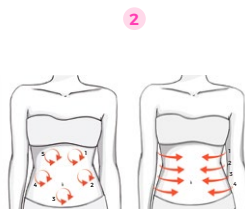


X3




X3


### 2. ACTIVER

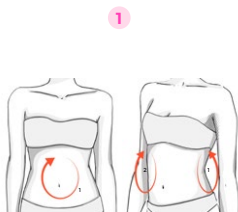

X3

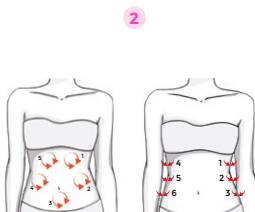

X3

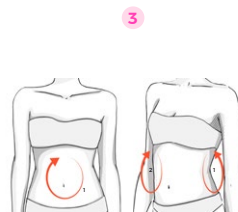


X3

# MISSION JAMBES DE RÊVE

10 MIN

APRÈS AVOIR RÉALISÉ UN MASSAGE MANUEL AVEC LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMÉTÉ SUR LA CUISSE, EFFECTUER AVEC VOTRE APPAREIL DE BEAUTÉ, DES LISSAGES PROFONDS ASCENDANTS SUIVI D'UN MAINTIEN STATIQUE DE 3 SECONDES POUR FIXER L'EFFET. LES MOUVEMENTS CIRCULAIRES PINCÉS QUI SUIVENT PERMETTRONT DE STIMULER LA PEAU DE FAÇON PLUS CIBLÉE. LA PEAU EST CONFORTABLE ET SE RAFFERMIE JOUR APRÈS JOUR.

## 1. APPLIQUER LA CRÈME

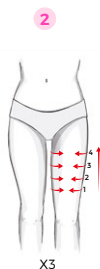

## 2. ACTIVER

