

NUESTROS 5 MANDAMIENTOS

1 - RESULTADOS A MEDIDA

MY C.L.E SE HA TESTADO EN TODO TIPO DE PIELES PARA OFRECER SOLUCIONES A MEDIDA. ENCUENTRE EL PROGRAMA QUE MEJOR SATISFACE LAS NECESIDADES DE SU PIEL, YA SEA CONSEGUIR MÁS FIRMEZA, MEJORAR LA TEXTURA DE LA PIEL, EL TONO O LA LUMINOSIDAD.

2 - PROBADO Y COMPROBADO

MY C.L.E ES UNA HERRAMIENTA DE BELLEZA RECOMENDADA POR TODOS NUESTROS EXPERTOS DE BELLEZA.

3 - USO SENCILLO


PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SOPORTE DE NUESTROS EXPERTOS ADEMÁS DE TUTORIALES EN NUESTRA WEB CARITA.ES

4 - FÁCIL DE LIMPIAR

CON TAN SÓLO UN ALGODÓN HUMEDECIDO EN AGUA O EN ALCOHOL PODRÁ LIMPIAR SU MY C.L.E. NO DEBE ENTRAR EN CONTACTO DIRECTO CON AGUA.

5 - GARANTÍA DE DOS AÑOS

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRA WEB. (WWW.CARITA.ES)

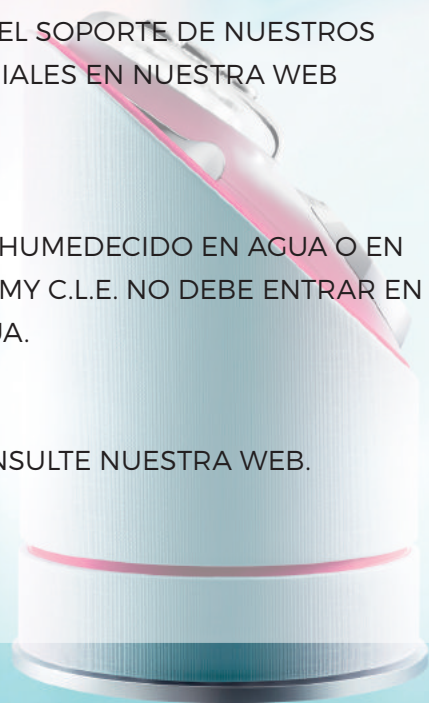

WE TAKE CARE OF YOUR DREAMS

11 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS



My C.L.E.
CINETIC LIFT EXPERT


DESCUBRA EL PODER DE LAS ENERGÍAS AVANZADAS
Nº1 TECNOLOGÍA DE BELLEZA DE USO EN CASA*:

TECNOLOGÍAS LED Y MICRO-CORRIENTES
PARA MOLDEAR LA PIEL Y CONSEGUIR FIRMEZA,
TEXTURA, RESPLANDOR Y VITALIDAD.

*Diseñado por Carita

MY C.L.E., inspirada en la alta aparatología profesional de Carita, la Cinetic Lift™ Expert, sublima su rutina de belleza diaria en casa.

La combinación de dos tipos de energía, luz led y micro-corrientes, estimula su piel día tras día proporcionando un efecto lifting y firmeza.

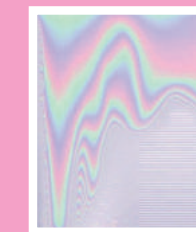

MICRO-CORRIENTES*
« ENERGÍA INSTANTÁNEA EFECTO LIFTING »
DISPONIBLE EN 5 NIVELES DE INTENSIDAD
PARA POTENCIAR EL VOLUMEN
Y LA TONICIDAD DE LA PIEL.



LUZ LED:**
« ENERGÍA PROGRESIVA A MEDIDA »
DISPONIBLE EN 4 COLORES PARA
RESPONDER A LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE SU PIEL: FIRMEZA,
TEXTURA, RESPLANDOR Y VITALIDAD.



FIRMEZA



TEXTURA



LUMINOSIDAD



VITALIDAD

RESULTADOS VISIBLES

Probado y comprobado por mujeres.

PROGRAMAS DE BELLEZA FACIAL*

83%

Confían en la **EFICACIA** de la rutina y les gustaría incorporar My C.L.E. en su rutina diaria.

RESULTADOS VISIBLES EN 4 SEMANAS

PROGRAMAS DE BELLEZA CORPORAL**

71%

Sienten que la textura de su piel es **MÁS HOMOGÉNEA** tras 28 días de uso.

*PROTOCOLO: LED ROJA E INTENSIDAD NIVEL 5 DE MICRO-CORRIENTES, JUNTO CON EL SÉRUM NÉOMORPHOSE DURANTE 7 MIN / DÍA, 28 DÍAS.
**AUTOEVALUACIÓN EN 49 MUJERES QUE SE APLICARON LA CREMA CARITA RÉVÉLATRICE JUNTO CON MY C.L.E UNA VEZ AL DÍA EN: MUSLOS, VIENTRES Y BRAZOS (LUZ LED ROJA E INTENSIDAD DE MICRO-CORRIENTES NIVEL 5) - RESULTADOS TRAS 4 SEMANAS.

PROGRAMAS DE BELLEZA EN CASA: ROSTRO

ANTI-EDAD : PREPARADOS, LISTOS, ¡FIRMES!



LUZ LED ROJA Y MICRO-CORRIENTES INTENSIDAD 4-5
3 OPCIONES DE SÉRUM

PARA UN EFECTO RELLENADOR, ANTI-ARRUGAS
LE SÉRUM NÉOMORPHOSE
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

PARA UN EFECTO REAFIRMANTE
LE SÉRUM STIMULIFT
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

PARA UN EFECTO ANTI-EDAD GLOBAL
LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS
(4-6 pulsaciones para rostro completo)

4 MN MASAJEA EL ROSTRO CON MOVIMIENTOS ASCENDENTES PARA REAFIRMAR Y REDENSIFICAR LA PIEL. REPITA 3 VECES CADA MOVIMIENTO. COMIENCE EL PROGRAMA DESDE EL ESCOTE HASTA LA FRENTE.

PUREZA : ¡COMBATE LAS IMPERFECCIONES!



LUZ LED AZUL Y MICRO-CORRIENTES INTENSIDAD 1-3


1 OPCIÓN DE SÉRUM

PARA UN EFECTO PURIFICANTE Y EQUILIBRANTE
LE SÉRUM CONTRÔLE
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

4 MN MASAJEA EL ROSTRO CON DELICADOS MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN LA ZONA T (MENTÓN, NARIZ Y FRENTE) PARA PURIFICAR Y EQUILIBRAR LA PIEL. REPITA 3 VECES CADA MOVIMIENTO. COMIENCE EL PROGRAMA DESDE EL ESCOTE HASTA LA FRENTE.

ASEGÚRESE DE CERRAR LOS OJOS CUANDO UTILICE EL DISPOSITIVO EN MEJILLAS, SIEN Y FRENTE.

ANTI-ROJECES/MANCHAS : ¡MISIÓN TONO PERFECTO!

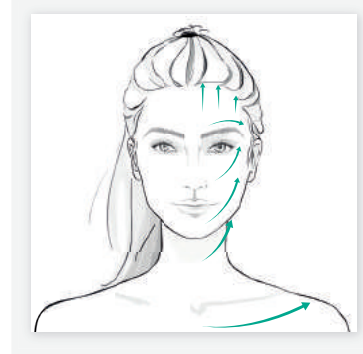

LUZ LED VERDE Y MICRO-CORRIENTES INTENSIDAD 1-3

3 OPCIONES DE SÉRUM


PARA UN EFECTO UNIFORMIZANTE, ANTI-MANCHAS
LE SÉRUM CLARTÉ
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

PARA UN EFECTO CALMANTE Y RECONFORTANTE
LE SÉRUM SENSIDOTE
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

PARA UN EFECTO ANTI-EDAD GLOBAL
LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS
(4-6 pulsaciones para rostro completo)

4 MN MASAJEA ZONAS ESPECÍFICAS REALIZANDO MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA PURIFICAR LA PIEL Y REVELAR UNA TEZ UNIFORME. REPITA 3 VECES CADA MOVIMIENTO. COMIENCE EL PROGRAMA DESDE EL ESCOTE HASTA LA FRENTE.

LUMINOSIDAD : SUPERGLOW ON THE GO!

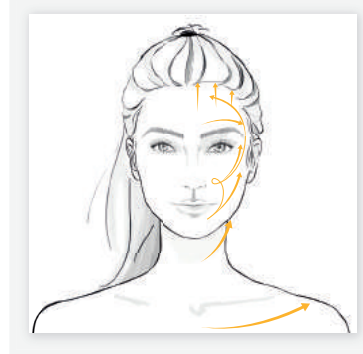

LUZ LED BLANCA Y MICRO-CORRIENTES INTENSIDAD 1-3

2 OPCIONES DE SÉRUM

PARA UN EFECTO REHIDRATANTE, ANTI TONO APAGADO.
LE SÉRUM LAGON
(6-8 pulsaciones para rostro completo)

PARA UN EFECTO ANTI-EDAD GLOBAL
LE SÉRUM PARFAIT 3 ORS
(4-6 pulsaciones para rostro completo)

4 MN MASAJEA EL ROSTRO CON MOVIMIENTOS EN FORMA DE «3» PARA REVITALIZAR LA PIEL Y REVELAR UNA TEZ RADIANTE. REPITA 3 VECES CADA MOVIMIENTO. COMIENCE EL PROGRAMA DESDE EL ESCOTE HASTA LA FRENTE.


ASEGÚRESE DE CERRAR LOS OJOS CUANDO UTILICE EL DISPOSITIVO EN MEJILLAS, SIEN Y FRENTE.

PROGRAMAS DE BELLEZA EN CASA: CUERPO


RETO : BRAZOS PERFECTOS

7 MN DESPUÉS DE UN MASAJE MANUAL CON LA CRÈME RÉVÉLATRICE EN LOS BRAZOS, REALICE MOVIMIENTOS INTENSOS SEGUIDOS DE MOVIMIENTOS ESTÁTICOS DE 3 SEGUNDOS. FINALICE EL MASAJE CON MOVIMIENTOS CIRCULARES PRESIONANDO PARA UN EFECTO LOCALIZADO. EL RESULTADO: UNA PIEL MÁS LISA Y TONIFICADA.

1. APLICAR LA FÓRMULA

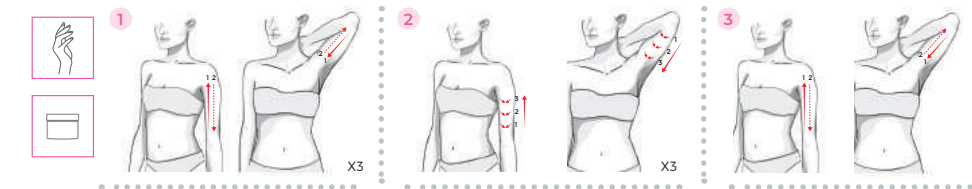

2. ACTIVAR CON MY C.L.E.

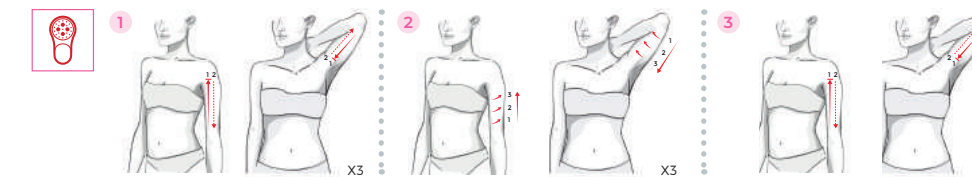

MOVIMIENTOS ALISANTES
MOVIMIENTOS CIRCULARES PRESIONANDO

LA CRÈME RÉVÉLATRICE FERMETÉ
(1-2 PULSACIONES DEL TAMAÑO DE UN GRANITO DE ARROZ)

LUZ LED ROJA E INTENSIDAD DE MICRO-CORRIENTES NIVEL 5.

CINTURA:
MOVIMIENTOS CIRCULARES LENTOS.
MOVIMIENTOS CIRCULARES PULSANDO.


BRAZOS Y PIERNAS:
MOVIMIENTOS ASCENDENTES ESTÁTICOS.
MOVIMIENTOS CIRCULARES PRESIONANDO.

ASEGÚRESE DE MANTENER EL DISPOSITIVO A UN PALMO DE DISTANCIA DE LA ZONA DE AXILAS.


OBJETIVO : CINTURA SUBLIME

5 MN DESPUÉS DE UN MASAJE MANUAL CON LA CRÈME RÉVÉLATRICE EN EL VIENTRE, REALICE MOVIMIENTOS CIRCULARES LENTOS SEGUIDOS DE MOVIMIENTOS CIRCULARES PRESIONANDO. EL RESULTADO: UNA PIEL MÁS LISA Y GRADUALMENTE TERSA.

1. APLICAR LA FÓRMULA

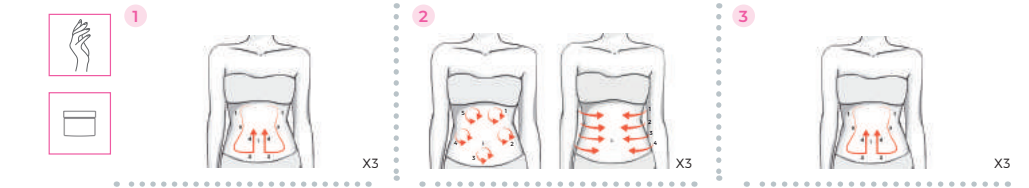


2. ACTIVAR CON MY C.L.E.

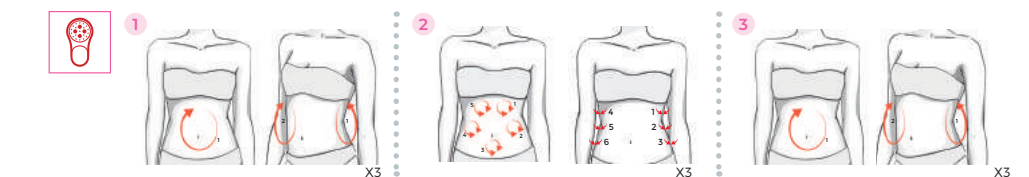


MISIÓN : PIERNAS DE CINE

10 MN DESPUÉS DE UN MASAJE MANUAL CON LA CRÈME RÉVÉLATRICE EN LOS MUSLOS, REALICE MOVIMIENTOS DE ALISADO INTENSOS SEGUIDOS DE UN MOVIMIENTO ESTÁTICO DURANTE 3 SEGUNDOS. FINALICE SU MASAJE CON MOVIMIENTOS CIRCULARES PRESIONADO PARA UNA ACCIÓN MÁS LOCALIZADA. DÍA TRAS DÍA, LA PIEL SE VE MÁS FIRME.

1. APLICAR LA FÓRMULA

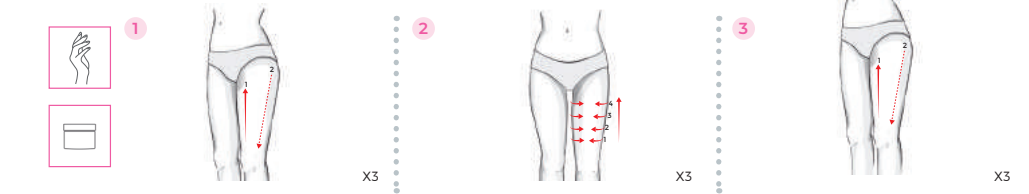

2. ACTIVAR CON MY C.L.E.

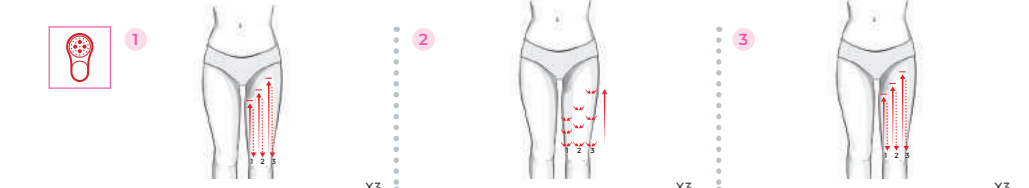

ASEGÚRESE DE MANTENER EL DISPOSITIVO A UN PALMO DE DISTANCIA DE LA ZONA SENSIBLE DEL INTERIOR DE LOS MUSLOS.